


Šiacu masažer NM 860

Delovi:

- 1 Masažne glave (ukupno 4)
- 2 Navlaka koja se može odvojiti i prati
- 3 Trake za ruku (po jedna sa leve i desne strane)
- 4 Priklučak za adapter (sa zadnje strane)
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 6 Dugme za masažu – uključivanje/isključivanje funkcije masaže i podešavanje intenziteta masaže
- 7 Dugme za zagrevanje – uključivanje/isključivanje funkcije grejanja
- 8 Adapter za struju

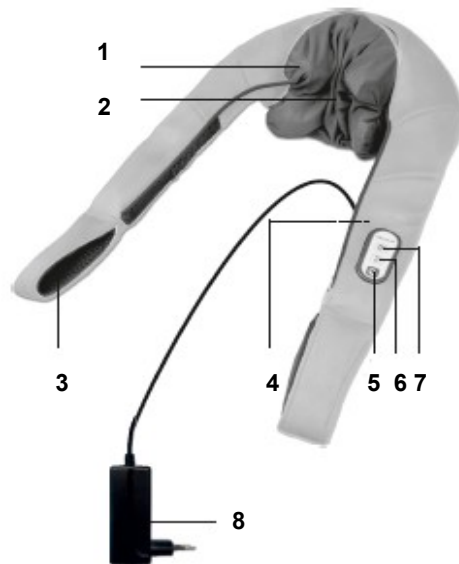

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i sačuvajte ga za ponovnu upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Objašnjenje simbola



Ovo uputstvo za upotrebu pripada ovom masažeru. Ono sadrži važne informacije za upotrebu. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Zanimarivanje ovog uputstva može dovesti do povrede ili oštećenja na masažeru.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.

Kategorija zaštite II



Broj lota



Oznaka proizvođača



Sigurnosna uputstva

Uputstva vezana za uključivanje u struju

- Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Masažer uključite u struju samo kada je masažer isključen.
- Koristite samo kabl za struju koji ste dobili sa masažerom.
- Držite masažer i kabl dalje od toplote, vrućih površina, vlage i tečnosti.
- Ne dodirujte utikač ili prekidač mokrim ili vlažnim rukama ili ako stojite u vodi.
- Ako masažer upadne u vodu ne pokušavajte da ga uzmete, već ga odmah isključite iz struje.
- Aparat povežite tako da je strujni kabl uvek lako dostupan.
- Nakon korišćenja uvek isključite masažer koristeći dugmiće za isključivanje na upravljaču, a zatim ga isključite iz struje.
- Da biste isključili masažer iz struje izvucite utikač, ali nikada nemojte vući za kabl.
- Nemojte držati masažer za kabl, nemojte kabl vući ili uvijati.
- Nemojte koristiti masažer ukoliko je oštećen kabl ili adapter. Radi sigurnosnih razloga sve popravke treba da obavi ovlašćeni servis.
- Da biste izbegli nezgode, uvek odnesite masažer u ovlašćeni servis.
- Vodite računa da kabl ne dovede do saplitanja. Vodite računa da kabl nije zamršen, prignječen ili uvijen.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila masažer za igranje.
- Nemojte koristiti masažer kao dodatak ili zamenu za medicinski tretman. Hronični problemi ili simptomi se mogu pogoršati.
- Ne koristite masažer ili ga koristite samo ako se prethodno konsultujete sa lekarom: ako ste u drugom stanju, ako imate ugrađen pacemaker, veštačke zglobove i elektronske implante, ako imate jednu ili više od nabrojanih bolesti i stanja: bolesti poremećaja venske cirkulacije (tromb), proširene ili upaljene vene ako imate otvorene rane, modrice, oštećenu kožu ili zapaljenje vena.
- Nemojte koristiti masažer blizu očiju ili drugih osetljivih delova tela.
- Ako za vreme korišćenja osetite bilo kakav bol ili nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem masažera i obratite se lekaru.
- Vodite računa kada koristite funkciju grejanja. Masažer ima toplu površinu. Ne koristite masažer na maloj deci, kod osetljivih osoba ili osoba neosetljivih na toplotu.
- Pre početka korišćenja konsultujte se sa lekarom ukoliko imate neobjašnjive bolove ili ukoliko već imate neki medicinski tretman ili koristite neku medicinsku opremu.

Uputstva pre korišćenja

- Uvek pre početka masaže pažljivo proverite kabl, dovod struje i sam masažer. Nemojte koristiti masažer ukoliko ima bilo kakva oštećenja.
- Nemojte koristiti masažer ukoliko primetite bilo kakva vidljiva oštećenja na kablju ili na samom uređaju, ako masažer ne radi kao što je predviđeno ili ukoliko vam je upao u vodu ili ispao. Da biste izbegli nezgode pošaljite ga u ovlašćeni servis.

Uputstva vezana za korišćenje

- Masažer je namenjen samo za ličnu upotrebu i nije predviđen za komercijalnu ili medicinsku upotrebu.

- Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa korišćenjem konsultujte se sa lekarom.

- Masažer koristite samo u zatvorenim prostorijama.

- Ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. za vreme kupanja ili tuširanja)

- Masažer koristite samo za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Nepravilna upotreba masažera poništava garanciju.
- Uvek koristite masažer na predviđenom mestu, na način opisan u uputstvu.
- Ne koristite masažer za vreme spavanja ili ako ležite.
- Ne koristite masažer pre nego što krenete na spavanje, jer masaža vrata ima stimulativni efekat.
- Nikada ne koristite masažer za vreme vožnje automobila ili ako upravljate nekom mašinom.
- Maksimalno vreme korišćenja je 15 minuta. Prekoračenje vremena korišćenja smanjuje vek trajanja masažera.
- Masažer koristiti preko odeće.


Bezbednosne informacije

- Veoma dugi periodi korišćenja mogu dovesti do pregrevanja. Uvek ostavite masažer da se dobro ohladi pre nego što ga ponovo koristite.
- Nikada ne ostavljajte masažer pored toplih površina, kao što su šporet ili druge grejne površine.
- Nikada ne ostavljajte masažer uključen bez nadzora.
- Vodite računa da masažer ne dođe u kontakt sa ostrim i zašiljenim predmetima.
- Nikada nemojte pokrivati masažer kada je uključen. Ne koristite masažer ispod čebadi i jastuka. Postoji rizik od požara, električnog udara ili povreda.
- Pazite da se prsti ili drugi delovi tela ne nađu između masažnih glava 1. Postoji rizik od povrede!
- Ne koristite tajmere za isključivanje ili odvojeni upravljač.

Uputstva vezana za održavanje i čišćenje

- Masažer ne zahteva održavanje. Ukoliko dođe do neispravnog rada, proverite da li je kabl pravilno uključen u struju.
- Masažer možete samo čistiti. Ukoliko se pokvari ne pokušavajte sami da ga popravite, jer će to dovesti do poništavanja garancije. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Deca ne smeju čistiti i održavati masažer bez nadzora.
- Nikada ne uranjajte masažer u vodu ili bilo koju drugu

tečnost. • Ukoliko tečnost ipak prodre u uređaj odmah ga isključite iz struje.

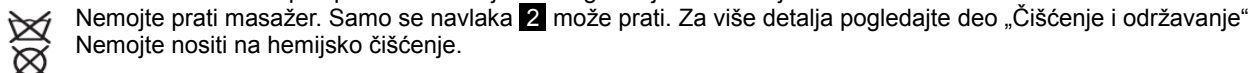

Nemojte prati masažer. Samo se navlaka **2** može prati. Za više detalja pogledajte deo „Čišćenje i održavanje“ Nemojte nositi na hemijsko čišćenje.

Korisne informacije

Hvala na poverenju i čestitamo! Kupovinom masažera NM 860 dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Ovaj masažer je namenjen za šiacu masažu vrata i ramena – ali se dodatno može koristiti i na drugim delovima tela (kao što su leđa, struk, gornji i donji deo nogu). Da biste postigli željene rezultate Vašim masažerom duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje. Proverite da li je masažer kompletna i da nije oštećen na bilo koji način. Ako sumnjate, nemojte koristiti masažer i obratite se servisnom centru.

Pakovanje sadrži: 1 Medisana masažer NM 860, 1 Kabl za struju, 1 Uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno.

Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

⚠ Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Šta je šiacu masaža?

Šiacu je vrsta masaže prstima i jedna je od najvažnijih vrsta masaže, zajedno sa ručnom limfnom drenažom i refleksologijom. Ovaj vid fizičke terapije razvijen je u Japanu, ali potiče od tradicionalne kineske masaže. Nežno „glađenje“ i blagotvoran pritisak su tehnike koje se koriste kako bi se probudila životna snaga i podstakla da protiče kroz telo. Cilj masaže nije samo opuštanje, već i postizanje optimalnog protoka životne snage radi harmonizacije duše i tela.

Kako radi Medisana masažer NM 860?

Medisana masažer NM 860 je se savremeni uređaj koji omogućava izvornu šiacu masažu različitih delova tela. Ovaj masažer ima 4 rotacije masažne glave. Masažer je i dodatno opremljen funkcijom za grejanje u masažnim glavama. Jedinstvena kombinacija intenzivne šiacu masaže i emitovanje toplote čine masažu delotvornom i opuštajućom. Sva podešavanja mogu se izvesti lako korišćenjem integrisanih dugmića. Trake za ruke omogućavaju individualno podešavanje intenziteta masaže zatezanjem traka.

⚠ Pazite da ne prekoračite maksimalno vreme upotrebe od 15 minuta.

Upotreba

Masaža vrata

1. Postavite kabl za struju na predviđeno mesto **4** na zadnjoj strani masažera.

2. Uključite u struju **8**.

3. Postavite masažer oko vrata tako da bude dobro oslonjen na ramena.

4. Provucite ruke kroz trake za ruke **3** sa leve i desne strane. Povlačenjem traka možete stabilizovati masažer na željenom mestu i prilagoditi intenzitet masaže (više zatezanja povećava intenzitet masaže)

5. Pritisnite dugme ON/OFF **5**  da biste uključili masažer. Masažer će odmah početi sa radom podešen na sporiju brzinu.

6. Pritiskom dugmeta za masažu **6**  možete povećati brzinu masaže. Pritisnite dugme za masažu **6**  ponovo da biste isključili masažer.

7. Da biste uključili funkciju grejanja pritisnite dugme za grejanje **7** . Funkcija grejanja radi samo kada je funkcija masaže aktivna i stvara prijatan osećaj toplote.

8. Da biste isključili funkciju grejanja, pritisnite dugme za grejanje **7**  ponovo.

9. Pritisnite dugme ON/OFF **5**  da biste isključili masažer. Nakon 15 minuta neprekidne masaže, masažer će se automatski isključiti.

Masaža drugih delova tela

Masažer se alternativno može koristiti i na drugim delovima tela, npr. leđima, ramenima, kukovima, gornjem i donjem delu nogu. Da biste primenili šiacu masažu na određeni deo tela, postavite masažer na taj deo tela i držite ga tu tokom masaže. Takođe možete dodatno koristiti i funkciju grejanja.

Čišćenje i održavanje

- Pre čišćenja obavezno isključite masažer i isključite ga iz struje. Ostavite da se masažer ohladi.
- Čistite masažer samo blago navlaženim sunđerom. Nikada nemojte koristiti četke, agresivna sredstva za čišćenje, benzin, razređivač ili alkohol. Istrljajte očišćeno mesto suvom čistom krpom da biste ga osušili.
- Nikada ne uranjajte masažer u vodu i vodite računa da voda ne prodre u masažer.
- Pre ponovne upotrebe sačekajte da se masažer potpuno osuši.
- Odmrsite kabl.
- Pazite da ne oštetite kabl za struju prilikom pakovanja.
- Idealno bi bilo da masažer čuvate u njegovom originalnom pakovanju na suvom i hladnom mestu.

ⓘ Navlaka **2 se može odvojiti kako bi se oprala.**

ⓘ Navlaka se može prati na 30°C. Pratite uputstva sa etikete. Da biste odvojili navlaku **2, otvorite rajfešlus i pažljivo je skinite.**

⚠ Deponovanje: Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

Ime i model

Napon

Potrošnja struje

Automatsko isključivanje

Uslovi korišćenja

Uslovi čuvanja

Dimenzije

Težina

Artikal broj

Ean broj

Medisana šiacu masažer NM 860

Ulaz: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 800 mA

Izlaz: 12V 2000 mA

24 W

nakon približno 15 minuta

Samo na suvom mestu

Na hladnom, suvom i čistom mestu

Približno 58 x 34 x 20 cm

Približno 1,55 kg

88942

40 15588 88942 4



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs